




DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

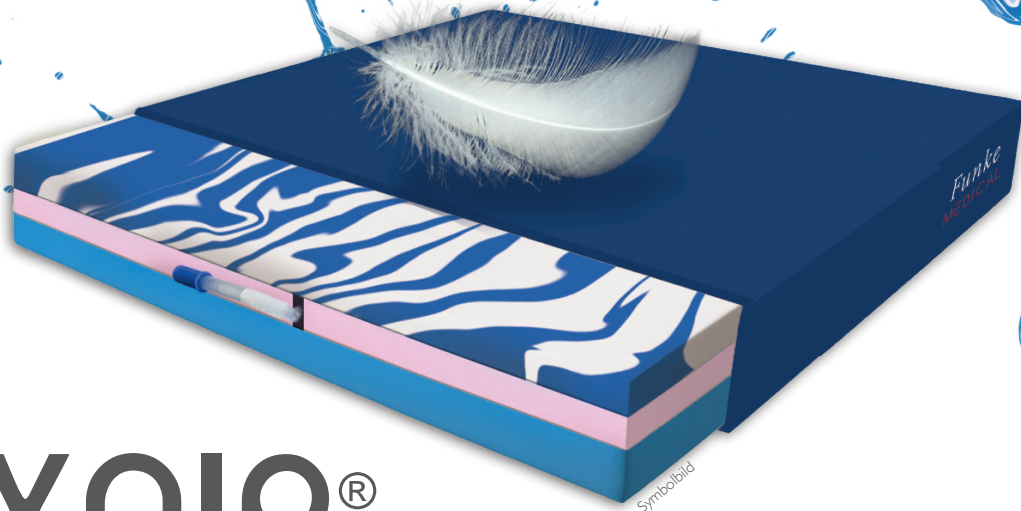

XAIR[®]
HYBRID

- LUFTZELLEN-SITZKISSEN -
Für aktive Rollstuhlfahrer!



Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH

- Stegemannstraße 5-7 56068 Koblenz
- Tel: 02 61-133 88-0 Fax: 0261-13388-22
- Onlineshop: www.burbach-goetz.de
- E-Mail: info@burbach-goetz.de




- 2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
- 2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
- 2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
- 2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
- 2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
- 2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
- 2016: Silver Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Silver Europameisterschaft (Tenerife, ES)
- 2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
- 2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)



Dekubitustherapie-Luftzellen-Sitzkissen für aktive Rollstuhlfahrer!

3 JAHRE GARANTIE*

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Geeignet zur Schmerztherapie
- Bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)
- HMV-Nr. 11.39.03.9001

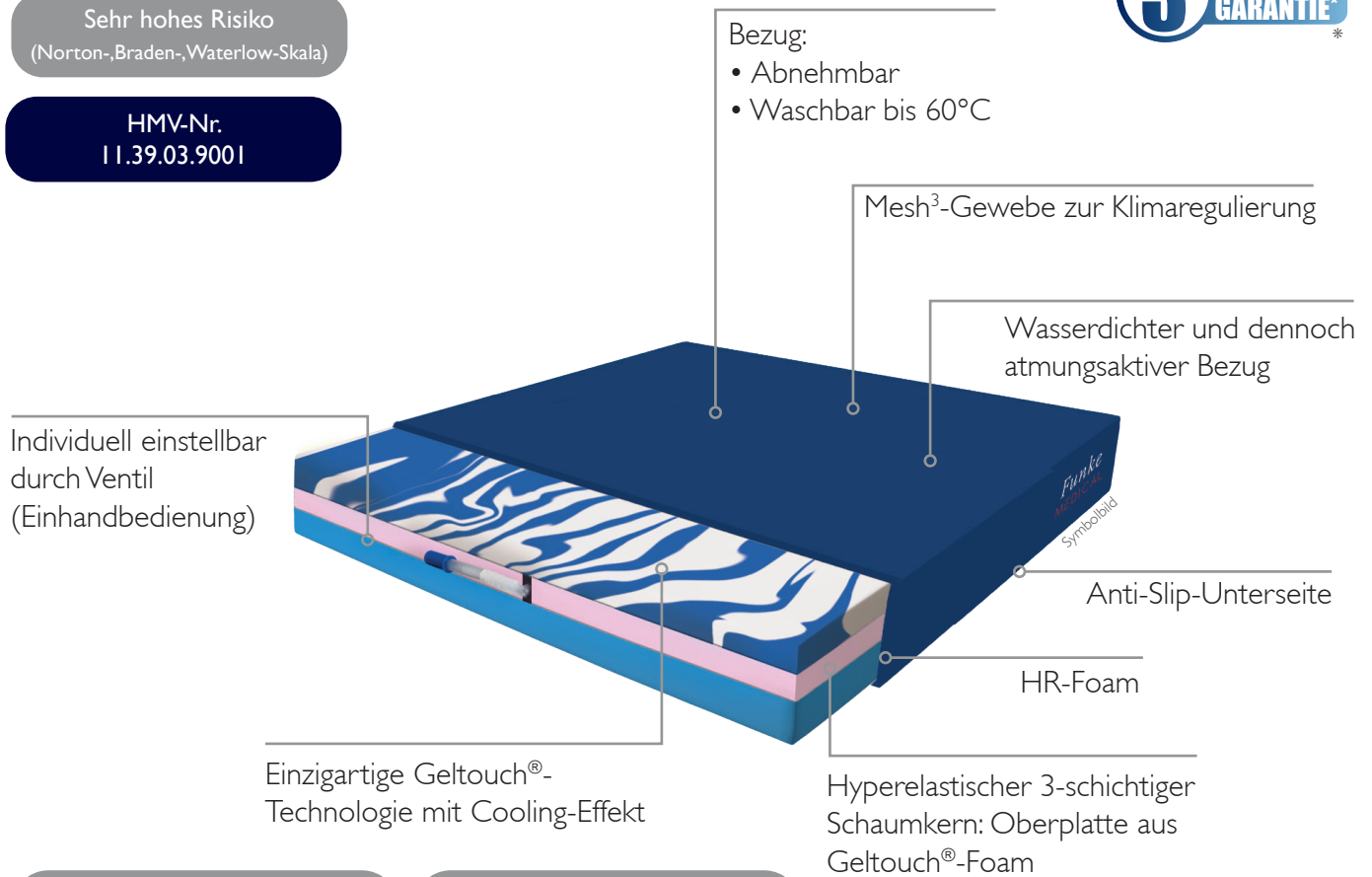

Größe Breite x Tiefe x Höhe	Art. - Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Art. - Nr.
38 x 40 x 8	XAIR3840	45 x 44 x 8	XAIR4544
40 x 40 x 8	XAIR4040	45 x 46 x 8	XAIR4546
40 x 42 x 8	XAIR4042	46 x 51 x 8	XAIR4651
41 x 46 x 8	XAIR4146	48 x 42 x 8	XAIR4842
42 x 40 x 8	XAIR4240	48 x 44 x 8	XAIR4844
42 x 42 x 8	XAIR4242	48 x 46 x 8	XAIR4846
42 x 44 x 8	XAIR4244	50 x 42 x 8	XAIR5042
42 x 46 x 8	XAIR4246	51 x 44 x 8	XAIR5144
42 x 52 x 8	XAIR4252	51 x 46 x 8	XAIR5146
45 x 42 x 8	XAIR4542	52 x 52 x 8	XAIR5252

JETZT ANSEHEN
auf YouTube!



XAIR[®] hybrid-Film

Offenporiger atmungsaktiver Geltouch [®] -Foam + HR-Foam + Visco-Foam	Autoklavierbar	Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671	Wasserdicht dennoch atmungsaktiv	Optimierte Druckentlastung	Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte	CE - Kennzeichnung MDR 2017/745	Wartungsfrei	Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2) CRIB 5	Patientengewicht: 0 bis 200 kg	Sehr leicht

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!




Griff für den einfachen Transport

Weiche Schutzabdeckung mit Klettverschluss




1

Schutzabdeckung nach oben klappen.

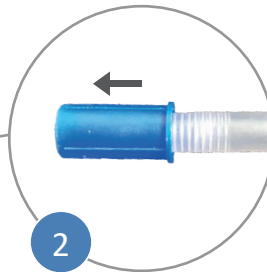

2

Ventil durch Ziehen öffnen und ca. 30 Sekunden warten, bis sich die Luftkissen selbstständig aufgeblasen haben.
(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

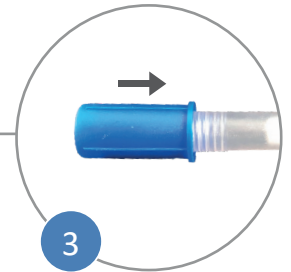


3

Ventil durch Drücken schließen.




4

Kissen auf die Sitzfläche des Rollstuhles oder Sitzes legen.
(Der Haltegriff muss nach vorne und die darauf angebrachten Pfeile müssen nach oben zeigen.)
Auf das Kissen setzen.

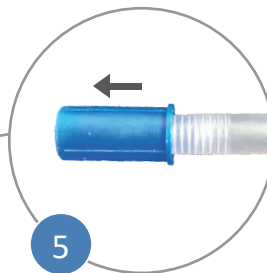



5

Vorsichtig das Ventil wieder öffnen bis der ideale Sitzkomfort erreicht ist.

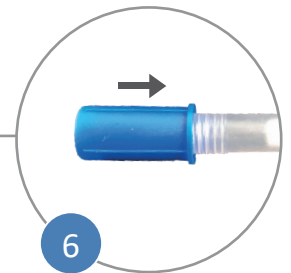

6

Ventil wieder schließen. Danach die Schutzabdeckung wieder nach unten klappen.

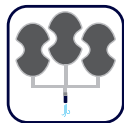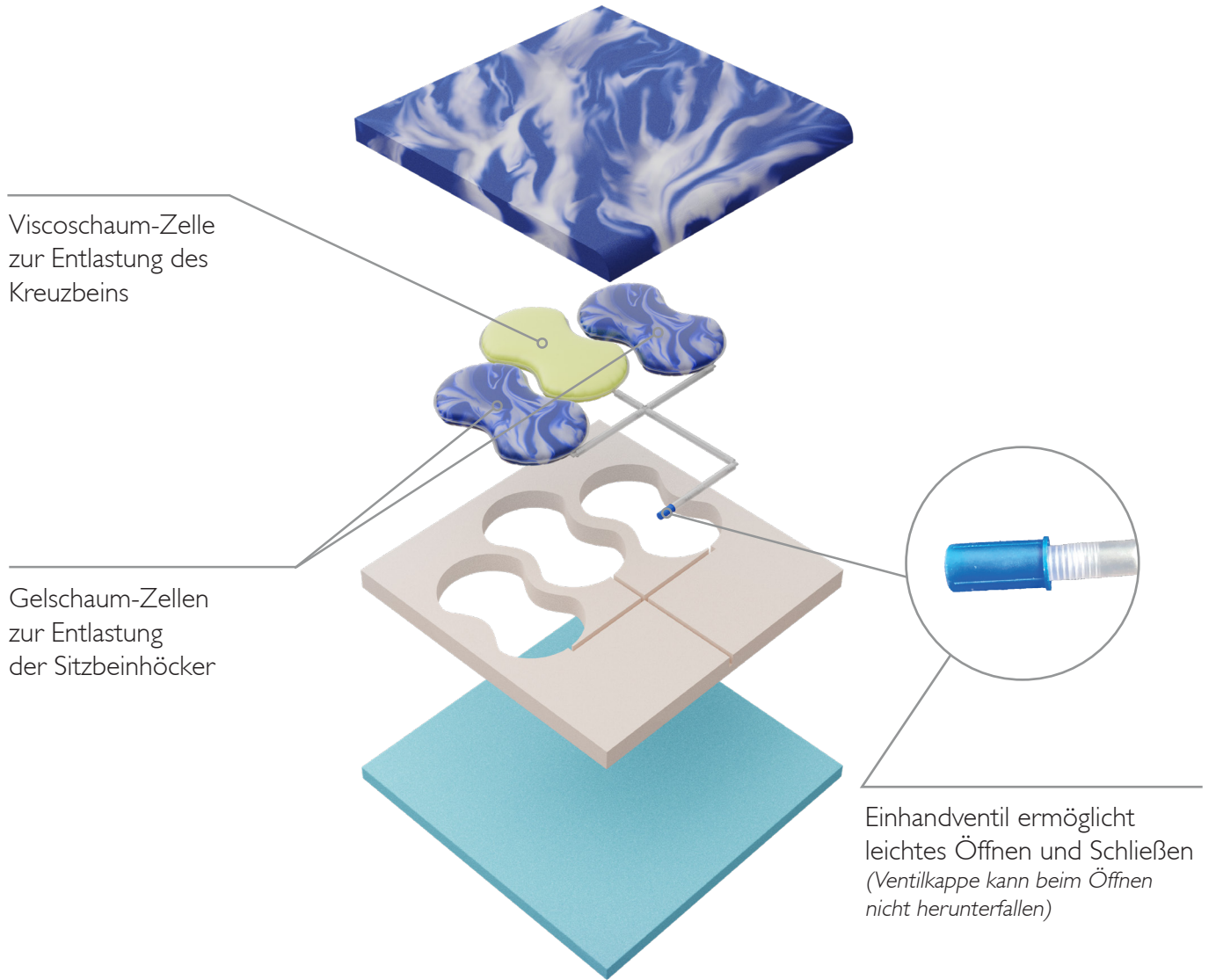

3-Kammer-Sitzkissen sorgt für eine optimale Druckentlastung



Individuell einstellbar für idealen Sitzkomfort



Keine Pumpe oder andere Werkzeuge notwendig



Schnelle und einfache Anpassung an die äußeren Druckverhältnisse



Kein Ausfallrisiko durch selbstaufblasende FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGIE



Sehr leicht – 70% weniger Gewicht als herkömmliche Luftzellen-Sitzkissen