

DE  
3C

  
**turnall**<sup>®</sup>

**System gegen Dekubitus  
zur seitlichen Druckentlastung**



Levabo<sup>®</sup> bietet mehr  
Lebensfreude für  
**Pfleger und Patienten**



- Automatisches 0-30° Seitenpositionierungssystem zur Prävention oder Behandlung von Druckgeschwüren
- Umfassende Druckentlastung
- Prävention von Druckverletzungen / Geschwüren und Behandlung von bestehenden Verletzungen / Geschwüren
- Kann in jedes Pflegebett mit abnehmbarer Matratze integriert werden
- Schmerzreduzierend durch schonende Patientenpositionierung
- Komfortabel und unterbricht nicht den Schlaf des Patienten
- Ein leichtes Anheben der Matratze der gegenüberliegenden Seite der primären Hebeseite sorgt für Unterstützung und Sicherheit und verringert das Risiko von Scherkräften.



**LEVABO**<sup>®</sup>

# Das Turn All®-System verwandelt ein **Standardbett** in eine **automatisiertes Seitenlagerungsbett**



Das neue Levabo Turn All® Seitendrehesystem wurde für Kliniken, Pflegeeinrichtungen und die ambulante Pflege entwickelt.

Das System unterstützt das Pflegepersonal beim regelmäßigen Drehen von immobilen Patienten. Diese sind einem hohen Risiko ausgesetzt einen Dekubitus zu bekommen.

## Klinische Effizienz

In mehreren klinischen Leitlinien wird empfohlen, Patienten mit eingeschränkter Mobilität mindestens alle zwei Stunden umzulagern. (NICE GUIDELINE 2015). 2019 Internationale Dekubitus-Leitlinien (EPUAP, NPIAP, PPPIA) empfehlen die Verwendung einer 30°-Seitenlagerung.

## Einfach zu verwenden

- Schnell und einfach zu installieren und zu bedienen
- Ein/Aus-Steuertaste
- Mögliche Positionierungsintervalle 30/30, 60/60, 90/90 Minuten Zeiteinstellung, wie lange das System automatisch ablaufen
- CPR-Funktion zur schnellen Entlüftung
- Das System gibt bei einem Stromausfall Alarm.

Kontrollbox mit **einfacher** Bedienung.



## Passt in jedes Bett

Passt in jedes Standardbett, wo es unter der Matratze platziert wird. Auch für Betten mit ansteigender Rückenlehne geeignet.

## Konstantes und kontrolliertes Drehen


Das System dreht den Patienten automatisch und ist entworfen worden, den Patienten sanft und leise zu drehen. Die Fachkräfte können sich stärker auf die wesentlichen Aspekte der Patientenbetreuung konzentrieren.

## System zur seitlichen Unterstützung

Das Turn All®-Drehesystem ist auf der gegenüberliegenden Seite des Primärhubs mit einer Stütze ausgestattet. Dieses Stützesystem eliminiert das Gefühl des Wegrutschens von der primären Hubseite und reduziert die Entstehung von Scherkräften.



# turn all®

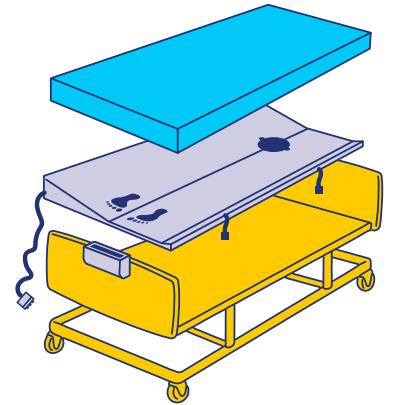

Scannen Sie den Code und  
sehen Sie wie **einfach** Turn All  
in ein **Bett Integriert**  
werden kann



Scannen Sie den Code und  
lesen Sie über die **vielen**  
**Vorteile** der **automatischen**  
**Patientenlagerung**



Das Turn All® System **bietet**  
**Unterstützung** bei der  
**Patientenlagerung**





# Vorteile des Turn All®-Systems

- Umfassende Druckentlastung
- Prävention von Druckverletzungen / Druckgeschwüren
- Behandlung von bestehenden Verletzungen / Druckgeschwüren
- Komfortabel und unterbricht den normalen Schlaf nicht
- Leise bei Benutzung
- Bariatrische/schwere Patienten können vorsichtig und leicht gedreht werden, wodurch die Gesundheit und das Wohlbefinden des Personals, das mit ihnen arbeitet, geschützt wird
- Volle Übersicht, da der Patient immer auf dem Rücken auf der Matratze liegt
- Schonende Lagerung auch für Patienten mit Schmerzen
- Ein leichtes Anheben der Matratze der gegenüberliegenden Seite der primären Hebe- und Unterseite sorgt für Unterstützung und Sicherheit und verringert das Risiko von Scherkräften.
- Zeitersparnis führt zu mehr verfügbarer Pflegezeit für den Patienten
- Verbessertes Mikroklima und verbesserte Blutzirkulation
- Robust, langlebig und zuverlässig
- Kann in jedes Pflegebett mit herausnehmbarer Matratze integriert werden
- Eine Wechselluftmatratze ist nicht mehr erforderlich.

## Turn All®-Produktpalette

Name des Produkts	Größe in cm.	Max Gewicht in Kg	Produkt nr.	Beschreibung
Turn All multi-Patient 3C mit cover m. TPU unterer teil	85 x 200	225	70128	Set mit Turn All® Hebemattmatratze, 1 Turn All® Außenhülle m. TPU unterer Teil, und 1 Pumpe, 3 cycles: 30/30, 60/60, 90/90minuten
Turn All Cover mit TPU unterer teil	85 x 200	N/A	70114	Turn All® Außenhülle m. TPU unterer Teil
Turn All Pump 3C	27 x 13 x 10	N/A	76117	Pumpe für das Turn All®-Systeme, 3 cycles: 30/30, 60/60, 90/90minuten

### Bariatrisch

Turn All multi-Patient 3C Bariatrisch mit cover m. TPU unterer teil	110 x 200	300	70098	Set mit Turn All® Hebemattmatratze, 1 Turn All® Außenhülle m. TPU unterer Teil, und 1 Pumpe, 3 cycles: 30/30, 60/60, 90/90minuten
Turn All Cover Bariatric with TPU lower part	110 x 200	NA	70126	Cover for the Turn All® Bariatric lifting mattress w/ TPU lower part.



### Konformitätserklärung (CE)

Das Unternehmen Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, erklärt, dass die Produkte in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation und den gesetzlichen Anforderungen entworfen und hergestellt werden.

### Produkt

Turn All® ist ein aktives medizinisches Produkt in Übereinstimmung mit: EU-Verordnung MDR (EU) 2017/745, Medizinprodukte - Klasse 1. Kontrolliert von Danish Medicines Agency 21/1 2021

### Herstellung

EN ISO 9001: 2015 QMC  
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

**LEVABO**<sup>®</sup>  
medical

Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Konzept zur Behandlung von Dekubitus auf

[www.levabo.de](http://www.levabo.de)  
[www.facebook.com/LevaboAps](https://www.facebook.com/LevaboAps)



Levabo Aps.  
Sverigesvej 20A  
8660 Skanderborg  
Denmark  
Tel. +45 31 70 40 25  
E-mail: [info@levabo.dk](mailto:info@levabo.dk)