

JAY J3 RÜCKEN

EINFACH - EFFEKTIV - SITZEN





VORTEILE EINES FESTEN RÜCKENS

KLINISCHE VORTEILE

- Unterstützung der Körperhaltung mit optimaler anatomischer Ausrichtung
- Verbesserung der Druckverteilung zur Erhaltung der Hautgesundheit
- Verbesserung der Sitzstabilität
- Anregen und Förderung von Körperfunktionen
- Verbesserung der Positionierung
- Mehr Sitzkomfort

LIFESTYLE & LEBENSQUALITÄT

- Selbstbewusstsein - bequemes und aufrechtes Sitzen
- Komfort - bequeme Stütze und Stabilisierung zugleich für längere Sitztoleranz
- Optik - elegantes und ansprechendes Design



ÜBERSICHT KONTUREN & FORMEN

VIER KONTURTIEFEN

Das JAY J3 Produktportfolio bietet vier unterschiedliche Konturtiefen:

Flache Kontur (SC) mit 50 mm, Mittlere Kontur (MC) mit 80 mm, Tiefe Kontur (DC) und Mittlere Tiefe Kontur (MDC) mit 150 mm Tiefe. Der DC und MDC Rücken sind in einzelnen Größen auch mit 180 mm Tiefe verfügbar.

Flache Kontur

Leichte seitliche Führung

50 mm



Mittlere Kontur

Moderate seitliche Führung

80 mm



Tiefe Kontur

Starke seitliche Führung

150 mm



Tiefe Kontur, Extra

Sehr starke seitliche Führung

180 mm



Mittlere Tiefe Kontur

Starke seitliche Führung

150 mm



Mittlere Tiefe Kontur, Extra

Sehr starke seitliche Führung

180 mm





ANPASSUNG BREITE & HÖHE

DER JAY J3 RÜCKEN ...

... ist in einer Vielzahl von Breiten und Höhen verfügbar. Die Auswahl erfolgt individuell nach der Oberkörperbreite und -höhe sowie der Breite des Rollstuhls. Für die perfekte, individuelle Anpassung!



ÜBERSICHT HÖHE

VIER RÜCKENVARIANTEN

Es kann zwischen vier unterschiedlichen Rückenvarianten gewählt werden - je nach funktionellen Bedürfnissen und Rumpfstabilität.

Schulterhoher Rücken	(SH)	530-610 mm
Hoher Rücken	(UT)	420-500 mm
Mittlerer Rücken	(MT)	300-380 mm
Tiefer Rücken	(LT)	170-240 mm

DREI INDIVIDUELLE RÜCKENHÖHEN

Passend für unterschiedliche Körpergrößen bietet der JAY J3 Rücken drei individuelle Höhen.




Kurz (S)



Mittel (M)



Hoch (T)

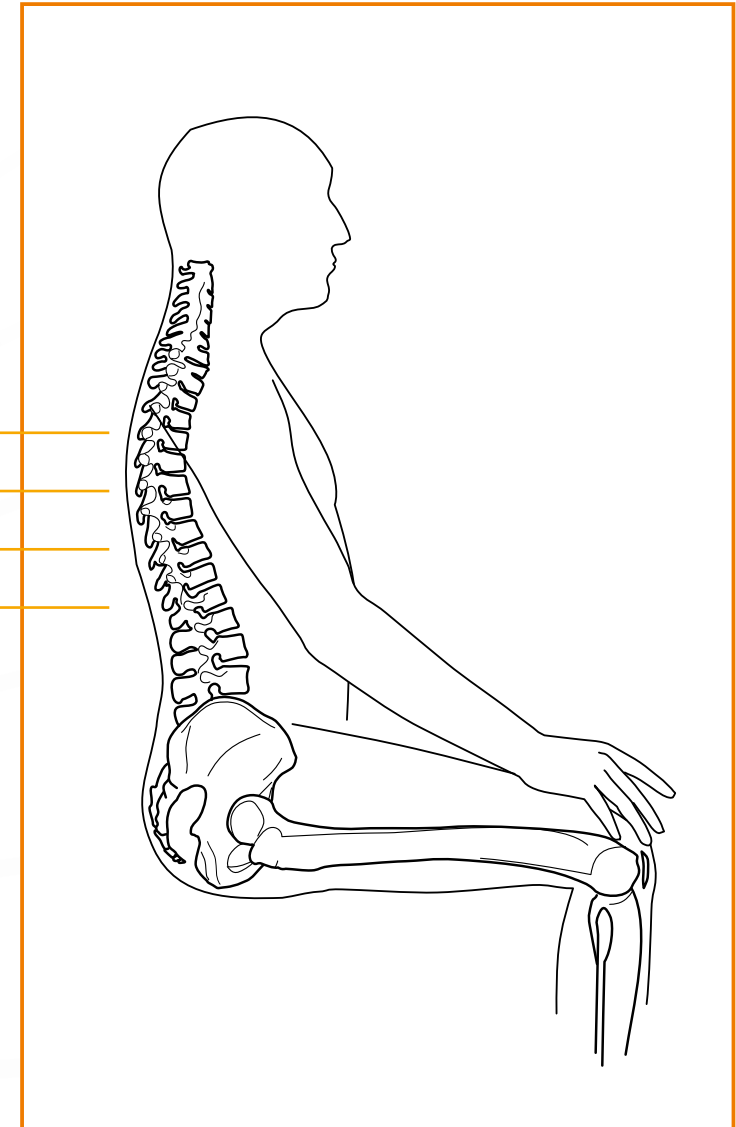

OPTIMALE POSITIONIERUNG

BEI EINEM FESTEN RÜCKEN IST DIE REFLEXION DER INDIVIDUELLEN RÜCKENFORM ENTSCHEIDEND, UM DIE MAXIMALE DRUCKVERTEILUNG, DIE RICHTIGE UNTERSTÜTZUNG, DEN OPTIMALEN KOMFORT UND WICHTIGE FUNKTIONEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

POSITIONIERUNGSKEILE

- Maximale Druckverteilung zur Erhaltung der Hautgesundheit
- Anpassung von individuellen Körperformen
- Optimale Unterstützung für eine verbesserte Sitztoleranz und komfortableres Sitzen
- Vielzahl an unterschiedlichen Positionierungskehlen

Der Positionierungs-Koffer enthält alle wichtigen Teile, die zur Anpassung des J3 Rücken an die individuelle Oberkörperform erforderlich sind. Der Koffer enthält 32 unterschiedliche Keile. Alternativ sind zwei Positionierungs-Sets mit 7 oder 12 Teilen verfügbar.



KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR

DER JAY J3 RÜCKEN IST IN KOMBINATION MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN WHITMYER KOPSTÜTZENHALTERUNGEN UND -POLSTERN VERFÜGBAR. WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN SIND DIE JAY GURTSYSTEME UND SEITENPELOTEN.

WHITMYER®



Die gesamte J3 Produktreihe einschließlich der Kopfstützenhalterungen und -polster wurden nach ISO Standards crash getestet.



Whitmyer COBRA (abklappbar) mit konturiertem Polster



Whitmyer AXYS mit Plush-Pad



4 Punkt-Brustgurt



Abschwenkbare Seitenpelotte



Feste Seitenpelotte

MONTAGE HALTERUNG

DIE J3 HALTERUNG IS EINFACH ZU MONTIEREN UND ABZUNEHMEN, BIETET EINE KOMPAKTE GRÖSSE UND VIELFÄLTIGE VERSTELLMÖGLICHKEITEN IN BREITE, HÖHE, TIEFE UND WINKEL. DER RÜCKEN KANN EINGEPASST WERDEN WÄHREND DER NUTZER IM ROLLSTUHL SITZT.

KOMPAKTE HALTERUNG

Vorgesehen für aktive Nutzer, leichtes Design.



VERSTÄRKTE HALTERUNG

Vorgesehen für passive Nutzer, für mehr Stabilität.



ANPASSUNG AN RÜCKENROHRE

Mit der patentierten J3 Befestigungsklemme kann der J3 Rücken schnell und einfach an alle Rückenrohre mit einem Durchmesser von 19 bis 28 mm montiert werden. Damit ist der J3 Rücken mit 90% aller auf dem Markt verfügbaren Rollstuhlmodelle kompatibel.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Häufig stehen Therapeuten und Händler vor der Herausforderung eine geeignete Position für die Befestigung auszuwählen. Die J3 Halterung als 2-Punkt-Befestigung benötigt wenig Platz, so dass die Passform des Rückens für den Nutzer nicht beeinträchtigt wird.



WINKLEINSTELLUNG

Die JAY J3 Befestigungsklemme reduziert den Verlust der Sitztiefe bei Einstellung des Winkels auf ein Mindestmaß. Damit kann gewährleistet werden, dass die Beckenposition unverändert bleibt.

BREITENVERSTELLUNG

Oft passt ein Rücken zum Rollstuhl, aber nicht zum Nutzer. Die J3 Halterung hat eine integrierte Breitenverstellung von 50 mm, so dass beispielsweise ein 460 mm breiter Rollstuhl mit einem 410 mm breiten J3 Rücken ausgestattet werden kann.



PASST PERFEKT

EINFACH ZU MONTIEREN

Mit nur zwei Befestigungspunkten kann der Rücken auch an nicht standardmäßige Rückenrohre und an Hindernissen vorbei einfach montiert werden.



EINFACH EINZUSTELLEN

Höhe, Breite, Tiefe und Winkel können alle einfach eingestellt werden während der Nutzer im Rollstuhl sitzt. Dadurch wird eine gute Anpassung und Positionierung des Nutzers sichergestellt.

Höhen- und Breitenverstellung



Winkel- und Tiefenverstellung,
Schritt 1



Winkelverstellung- und Tiefenverstellung,
Schritt 2



EINFACH ZU BEFESTIGEN & ABZUNEHMEN

Das Anbringen des JAY J3 Rückens ist einfach und nur mit einer Hand möglich. Der automatische Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass der Rücken beim Einhängen wieder sicher befestigt ist. Die Abnahme erfolgt gleichermaßen einfach über einen Hebel, der mit eingeschränkter Finger- bzw. Handfunktion bedient werden kann.



JAY J3 RÜCKEN

WEITERE MODELLE DER SERIE

J3 CARBON RÜCKEN

Carbon ist leicht und stabil, somit das ideale Material für diesen Rücken. Der J3 Carbon Rücken bietet die gleiche Festigkeit wie Aluminium (ist aber um 60% leichter) und verringert damit das Gewicht, das der Rollstuhlfahrer tagein, tagaus bewegt. Der Rücken beeindruckt mit seiner einzigartigen und ansprechenden Optik. Eine Kombination aus aktiven und modernen Design.





Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de



Weitere Informationen zu den kompletten technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



000690961/2000/Sommendruck/0616